

使用說明


艾歐骨得注射液 20微克/80微升

Alvosteo 20 µg /80 µl solution for injection

使用艾歐骨得注射筆時，請小心地遵照下列指示，並閱讀包裝中的藥品說明書。

每次注射之前，請務必先清洗雙手，依照專業醫護人員的指示準備注射部位。

艾歐骨得注射筆圖解

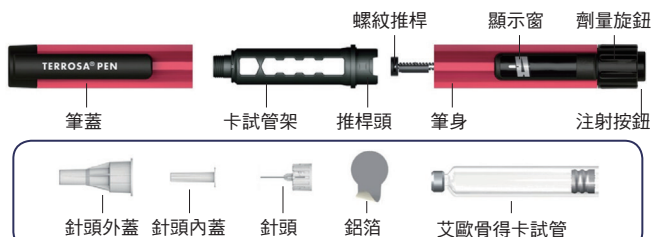

注射筆使用準備：只有首次使用或更換卡式管需執行步驟 1 2 3

每一次當您插入新的艾歐骨得卡式管之前，請仔細閱讀本使用說明。毋需在每日的注射前重複此操作。

1

裝上/更換卡式管



2

安裝針頭



3

注射準備

(僅首次裝填新卡式管須進行)



每日注射步驟

4

劑量設定及注射

使用艾歐骨得注射筆注射

1. 安裝注射筆針頭




安裝針頭。

2. 劑量設定



旋轉劑量旋鈕直至無法進一步旋轉。確保顯示視窗出現箭頭符號。

選定注射部位

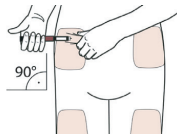

請輕以拇指和食指捏起大腿或腹部皮膚褶皺。將針頭垂直溫和地插入皮膚中。



按下按鈕到底，停留在皮膚至少六秒鐘。

* 注意：如果卡式管含量少於80微升，劑量旋鈕則無法旋轉到箭頭處。此時請取下針頭，更換卡式管，再進行注射準備。

5

完成注射



將注射筆緩慢拔出皮膚。查看劑量在顯示視窗是否已回到起始位置，以確認完成注射。



小心將針頭外蓋蓋上針頭。



取下針頭，丟棄於防刺銳器處置容器。

* 在用完28天藥劑前，請勿將卡式管從注射筆中取出。



使用完畢後盡速將整支注射筆放回2到8°C的冷藏冰箱。

清潔與儲存

- 小心使用注射筆，避免其掉落或敲擊到堅硬表面
- 用水沾濕布擦拭注射筆即可
- 勿使用酒精及任何其他清潔劑
- 請不要將艾歐骨得注射筆放進水或任何液體中可能造成損壞。
- 每次使用後請立即放回冰箱中
- 若外出請使用保冷設備
- 絕對不可放於冷凍庫中

重要注意事項

- 每管卡式管含28天份藥劑
- 每次使用新的一管注射劑前請紀錄開始使用日期
- 若您注意到注射劑為渾濁、變色或含有顆粒，請勿使用並聯絡您的醫療專業人員
- 若發現注射筆有破損或滲漏，請勿使用，並聯絡您的醫療專業人員
- 請不要與他人共用您的注射筆
- 每次注射完請務必取下針頭並丟棄，若未取下會導致藥劑中產生氣泡
- 請將艾歐骨得注射劑放於兒童不易觸及處
- 使用前請閱讀並遵守本使用說明書及艾歐骨得仿單
- 艾歐骨得注射筆可在18歲以上的患者自行使用、及病患照護者使用。
- 若沒有受過適當訓練的人員從旁協助，不建議盲人或視力不良的人使用

相容針頭與丟棄

- 每次注射請裝上新針頭
- 每個針頭只能使用一次
- 相容針頭為 BD Micro-Fine Ultraneedles 29至31G 長度為8或5 mm
- 針頭請丟棄於專用回收盒
- 艾歐骨得注射筆使用壽命為兩年，丟棄前請取下針頭及用過的卡式管依照醫護人員指示丟棄

警語

請按照本說明書的指示進行操作。如不遵守說明，可能存在不正確藥物使用、錯誤劑量，感染疾病傳播的風險。如果您有任何健康問題，請立即尋求醫療建議。

常見疑難排解 問題

解答

A. 卡式管內看到小氣泡

➡ 小氣泡不會影響劑量，也不會對您造成傷害。

B. 無法安裝針頭

➡ 更換針頭。如果第二個針頭一樣無法安裝，請與客服聯繫。

C. 針頭折斷/彎曲/扭曲

➡ 更換針頭。

D. 在操作注射筆步驟3: 注射準備時，針頭尖端沒有滴出少量藥劑

➡ 請更換新針頭並且重複操作步驟3，如果新的針尖仍然沒有滴出藥劑，請不要使用此注射筆並與醫療人員聯繫。

E. 劑量旋鈕無法順時針旋轉到箭頭處

➡ 表示艾歐骨得卡式管剩餘的含量少於80微升。請更換卡式管，取下針頭，然後根據注射準備步驟進行填充測試。

F. 完成注射後，不小心將劑量旋鈕順時針轉動。我如何將劑量旋鈕重新轉回起始位置？

➡ 請勿按下按鈕，只需將劑量旋鈕逆時針旋轉至起始位置即可重置。

