

1 猛健樂®多劑量注射筆KwikPen操作流程

事前準備

清潔雙手與注射部位，並準備以下用品：



- Mounjaro 注射筆
- 注射針頭
- 酒精棉片
- 紗布或棉球
- 針頭保存容器

猛健樂®注射筆 使用教學影片


請掃描右方
QR Code
立即觀賞




使用步驟

安裝注射針頭

1

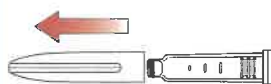

- 請將注射筆蓋直直拔起打開。

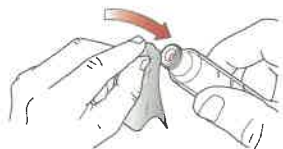


- 以酒精棉片擦拭紅色內膜。

2




- 拿出新的針頭。每次注射一定要使用新的針頭，以避免感染與針頭阻塞。撕開針頭外罩的紙質封口。

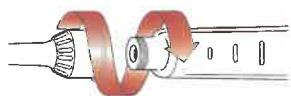

- 將蓋上蓋子的針頭直推到注射筆上，然後旋轉針頭，直至拴緊為止。


3

a. 針頭外罩

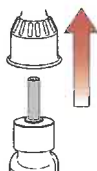

- a. 取下針頭外罩，將其重複使用。


b. 針頭內罩

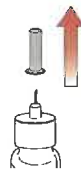

- b. 拔掉針頭內罩，將其丟入居家廢棄物中。

每次注射前，請都要確實執行排氣動作


*排氣可以排除藥匣中的空氣，並確保您的注射筆正常運作。

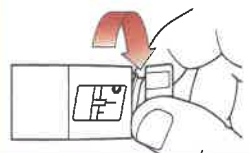

- 旋轉劑量旋鈕直到您聽到 2 聲喀擦聲並在視窗看到長線條 (可向任意方向旋轉，直到正確刻度)。



Position for priming

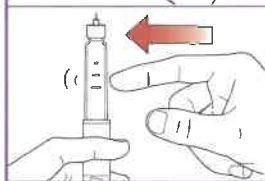

- 將針頭朝上，握穩您的注射筆並輕敲注射筆藥匣，讓氣泡聚集到上方。



按住5秒

- 藉由按下劑量旋鈕直到停止，並默數5秒。
- 注射筆針頭尖端將流出少量藥物，表示您已排氣完成。0 圖示必須顯示在劑量視窗中。

1. 若您未看見藥物，請重複此排氣步驟，最多僅能嘗試 2 次。

2. 若您還是未看見藥物，請更換注射針頭並重複此排氣步驟，最多另行嘗試 1 次。

